

# MLSIGHT OPTIMIZER

STYRKEBOOST  
VID BEHOV

Underlättar  
på nära håll



 **MULTILENS**

# MLSIGHT OPTIMIZER

## STYRKEBOOST VID BEHOV

Arbete på nära håll med bifokala- eller progressiva glasögon kan vara ansträngande och leda till dålig arbetsställning. För att minska besvären och underlätta arbete på nära håll har vi tagit fram ML SightOptimizer.

ML SightOptimizer är glasögon med speciellt utformad optik som enkelt hängs ovanpå befintliga glasögon. Detta gör att användaren behåller sin individuellt utprovade optik men får mer anpassning på nära håll. Detta ger en bättre arbetsergonomi och ett behagligare seende.

Fördelarna med ML SightOptimizer är en omedelbar ”styrkeboost”, konvergensavslappnande prisma, antireflexbehandling samt en tunn och lätt båge. ML SightOptimizer passar bra för personer med reducerad syn samt personer som stundtals behöver extra addition.

**OPTIK:** Konvergensoptimerade linser med styrka +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 respektive +3,0

**BÅGE:** Specialdesignade bågen HangOn som hängs ovanpå befintliga glasögon

**YTBEHANDLING:** ML Prima+

**VIKT:** 15 g

FEM EGENSKAPER SOM FÖRHÖJER SEENDET PÅ NÄRA HÅLL:

# MLSIGHT OPTIMIZER

## STYRKEBOOST

Extra addition då tillfället kräver det för bättre och mer ergonomiskt seende anpassat för nära håll.

## BRETT SYNFÄLT

Öppen båge med klar och ren optik i hela glasets för att optimera seendet på nära håll över befintliga glasögon.

## PRISMAOPTIK

Lätt avlastande prisma för ett mer avslappnat seende på nära håll.

## ANTIREFLEXBEHANDLING

ML SightOptimizer är behandlade med ML Prima+. Detta ger en klarare återgivning och minskar reflexer i linserna.

## BÅGEN HANGON

En smidig och nätt båge designad för att passa de flesta glasögon. Titanbågen är lätt och slitstark. De flexibla skalmarna gör att bågen sitter bra och bekvämt på de flesta glasögonbärare.

## VARIANTER

- ML SightOptimizer 10, ökar den upplevda styrkan med ca 1 dioptrier
- ML SightOptimizer 15, ökar den upplevda styrkan med ca 1,5 dioptrier
- ML SightOptimizer 20, ökar den upplevda styrkan med ca 2 dioptrier
- ML SightOptimizer 25, ökar den upplevda styrkan med ca 2,5 dioptrier
- ML SightOptimizer 30, ökar den upplevda styrkan med ca 3 dioptrier

## KOSTNADSEFFEKTIVT

- Samma lösning fungerar även om de habituella glasen eller bågen byts ut
- Flera personer kan använda samma lösning
- Ett billigare alternativ än terminalglasögon

## TESTSET 1



Testsetet innehåller följande:

- 1 st ML SightOptimizer 10-testbåge
- 1 st ML SightOptimizer 20-testbåge
- 1 st Fitting Guide

## TESTSET 2

Testsetet innehåller följande:

- 1 st ML SightOptimizer 20-testbåge
- 1 st ML SightOptimizer 30-testbåge
- 1 st Fitting Guide

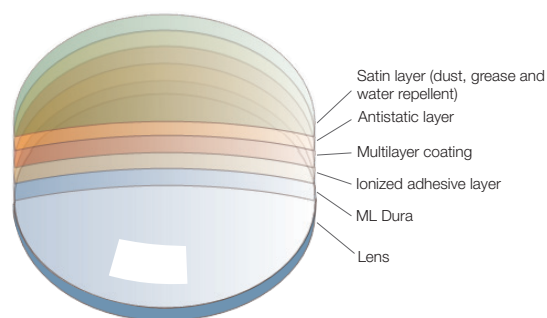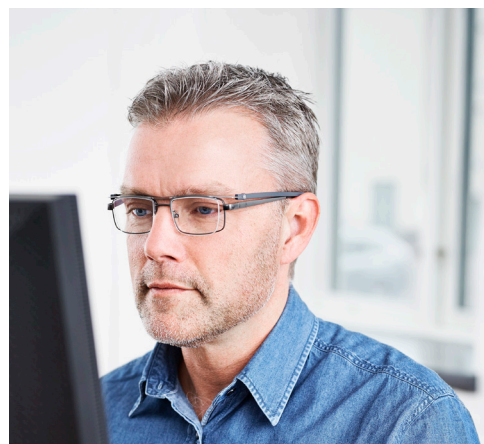

Olika lager i ML Prima +



## **MULTILENS AB**


Box 220, 435 25 Mölnlycke, Sweden

Visiting address: Skinnefjällsvägen 1

Phone: +46 (0)31 88 75 50

Fax: +46 (0)31 88 39 77

info@multilens.se, www.multilens.se



Multilens  
är ett unikt  
företag inom  
specialoptik.